


嫌気性菌用培地

KBM アネロRS-PEA/BBE寒天培地

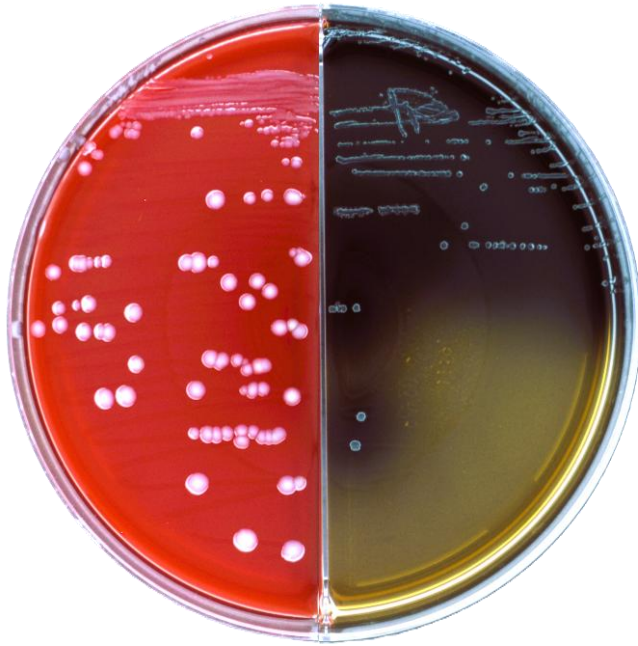

<BBE寒天培地>

組成	精製水1Lあたり
ペプトン	20.0 g
酵母エキス	5.0 g
D-グルコース	1.0 g
胆汁末	20.0 g
エスクリン	1.0 g
L-アルギニン	1.0 g
ピルビン酸ナトリウム	1.0 g
クエン酸鉄アンモニウム	0.5 g
L-システイン	0.3 g
亜硫酸ナトリウム	0.1 g
ビタミンK1	0.01 g
ヘミン	0.01 g
ゲンタマイシン	0.1 g
寒天	15.0 g

pH 7.0 ± 0.2

<培養例>

Bacteroides fragilis ATCC25285

<特徴>

- ◆ KBM アネロRS-PEA/BBE寒天培地は、臨床材料から偏性嫌気性菌を分離するための培地です。
- ◆ アネロRS-PEA寒天培地は腸内細菌の発育を抑制し、偏性嫌気性菌の選択培地として適しています。
- ◆ BBE寒天培地は、*B. fragilis group*の選択分離培地です。
- ◆ 1枚ずつ嫌気状態で包装されているため、必要な数だけすぐに使用できます。

※PEAに感受性の菌は発育が抑制される場合がありますので、適宜非選択培地の併用をお勧めします。

製品コード	製品名	包装	価格	貯法	有効期限
44167	KBM アネロRS-PEA/BBE寒天培地	1枚×10	¥4,500	2~10°C	150日



KOHJIN BIO

コージンバイオ株式会社 培地の開発・製造・販売

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-1-3

TEL: 049-284-3781

FAX: 049-284-4784

e-mail info@kohjin-bio.co.jp

URL <http://www.kohjin-bio.co.jp>