

臨床細菌検査用分画培地


“KBM” コロンビアCAヒツジ血寒/マッコンキー寒天培地

コロンビアCA
ヒツジ血寒

マッコンキー
寒天

コロンビアCA
ヒツジ血寒

マッコンキー
寒天

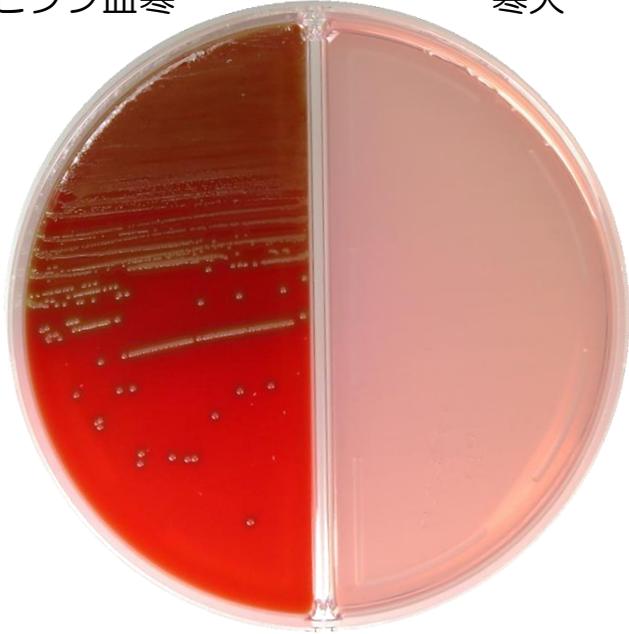

Streptococcus pneumoniae ATCC 6305

【培養条件】好気条件下、35°C、24時間培養

Escherichia coli ATCC 25922

【培養条件】好気条件下、35°C、24時間培養

<特徴>

- ❖ “KBM” コロンビアCAヒツジ血寒/マッコンキー寒天培地は、臨床材料中に混在するグラム陽性菌とグラム陰性菌をそれぞれ分離するための培地です。
- ❖ コロンビアCAヒツジ血液寒天培地にはコリスチンとアズトレオナムが添加されており、大部分のグラム陰性菌は発育が抑制されます。ヒツジ血液が含まれているため、大部分のグラム陽性菌が発育し、溶血反応の確認が出来ます。
- ❖ マッコンキー寒天培地は、胆汁酸塩が添加されているためグラム陽性菌の発育を抑制します。乳糖が含まれているため、乳糖分解菌は赤色コロニーを、*Salmonella*属や*Shigella*属などの乳糖非分解菌は無色のコロニーを形成します。

製品コード	製品名	包装	価格	貯法	有効期限
44150	“KBM” コロンビアCAヒツジ血寒 / マッコンキー寒天培地	10枚/袋	¥2,000	冷暗所 (2-10°C)	75日



KOHJIN BIO

コージンバイオ株式会社 培地の開発・製造・販売

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-1-3

TEL:(049)284-3781(代)

FAX:(049)284-4784

e-mail: info@kohjin-bio.co.jp

URL <http://www.kohjin-bio.jp>